



リョービ東和

バイブレーター

取扱説明書TV-72・TV-74共用



ご使用前に本取扱説明書をよくご覧の上ご使用くださるようお願いいたします。

この度はリョービ東和のバイブレーターを、お買い上げ下さいまして誠にありがとうございます

TV-72


●特長

- リョービ東和のバイブレーターは2軸方式を採用していますので、もむ力とたたき力を持ち合わせた効果的なマッサージ器です。
- 短時間で抜群のマッサージ効果が得られます。
- 強弱2段切換方式でその使用目的に合った強さを選ぶことができ、快適なマッサージを楽しめます。
- ご家庭でだれでも簡単にご使用になれます。

●仕様

電 源……………一般家庭用 100V
 消費電力……………平均69W
 振動圧力……………最高 4 kg
 周 波 数…………… 50Hz～60Hz
 バイブレーション〔上下振動・回転(按)〕及び
 サーキュラーモーション〔回転(摩)〕……………
 1分間 強 約2,800～3,400回
 弱 約1,400～1,700回

います。このバイブレーターを、より快適に末永くご使用頂くために次の点にご注意下さい。

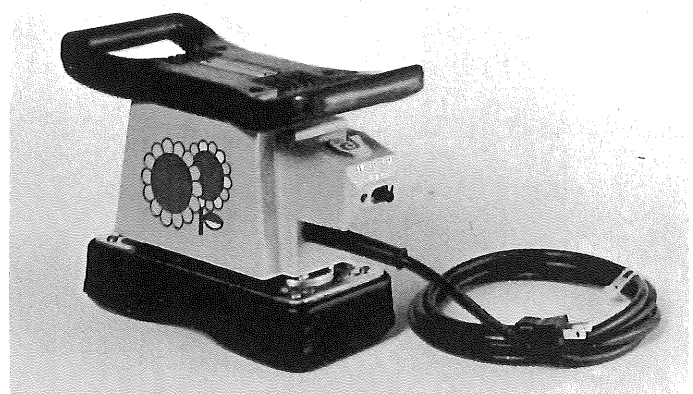

モデルTV-72

振動表層域……………半径 約18cm～25cm
 圧深層域……………斜深22° 約10cm
 製品重量…………… 3.7kg
 製品寸法…………… 270×140×206mm
 電気料金……………30分—約0円50銭
 厚生省医療用具承認種別……………
 器具機械・バイブレーター
 厚生省医療用具製造承認証… (49B)第155号


TV-74

●特長

- お仕事疲れや、スポーツの疲労回復に短時間ですぐれたマッサージ効果を発揮。
- ご家庭で楽しく、家族で交互にご使用いただけます。
- 音が静かでカラフルな小型軽量タイプ。
- 安全な二重絶縁方式を採用。

●仕様

電 源……………一般家庭用 100V
 消費電力……………平均40W
 振動圧力……………最高 4 kg
 周 波 数…………… 50Hz～60Hz
 サーキュレーション(回転)……………
 50Hz 1,400R.P.M/60Hz 1,700R.P.M
 製品重量…………… 2.7kg

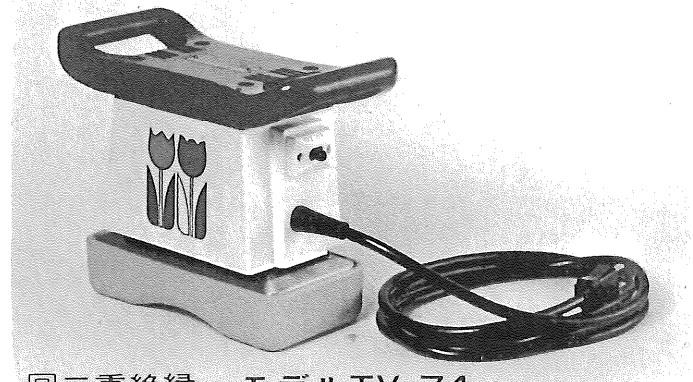








回二重絶縁 モデルTV-74

製品寸法…………… 260×124×194mm
 電気料金……………30分—約0円30銭
 厚生省医療用具承認種別……………
 器具機械・バイブレーター
 厚生省医療用具製造承認証… (49B)第671号

●ご使用前に

リョービ東和バイブレーターはマッサージ器として強力な効果を発揮しますので、誤った方法で使用せぬよう下記事項にご注意下さい。また、長時間の連続使用は、機械の寿命を縮めますのでして下さい。(30分間に5分程度の割合で休ませるのが機械の寿命を長持ちさせます)

- 頭部への使用はさけて下さい。
- 体力の衰えた方、急性疾患の方、妊産婦の方、そのほか身体に異常のある方は医師にご相談の上、ご使用下さい。
- 布団・毛布類で包んだり、覆ったりして使用しないで下さい。

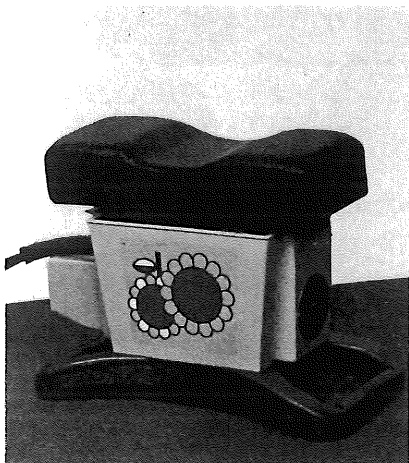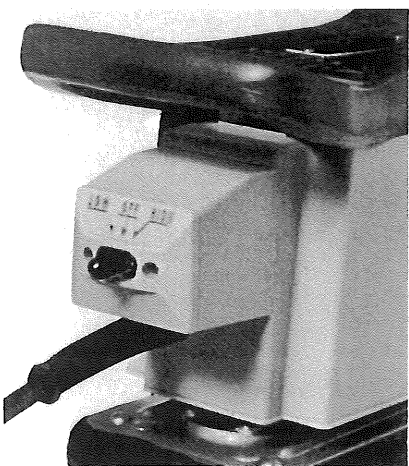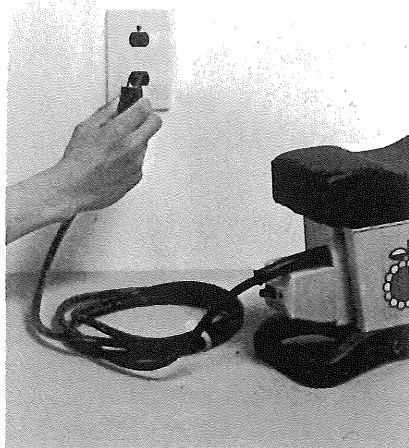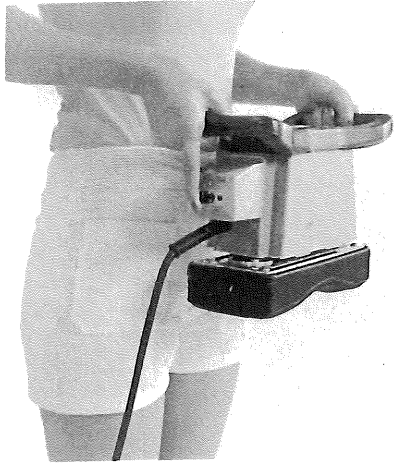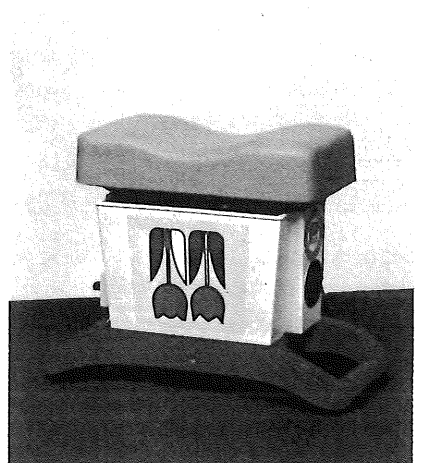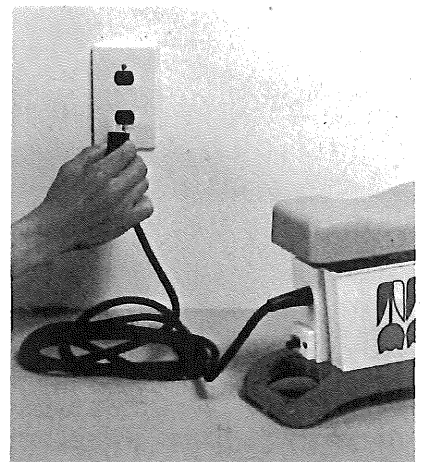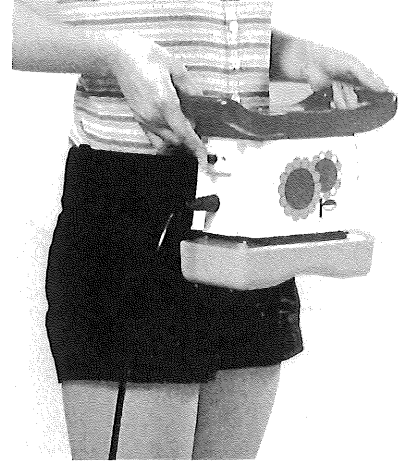モデルTV-72

モデルTV-74


●取扱い方

始動 (TV-72・TV-74共通)

- スイッチをONにして振動が一定(2~3秒)になったら局部に軽くあててご使用下さい。

(注)局部にあてたままスイッチをONにすると適性振動がえられず機械の寿命を短かくする恐れがあります。

※尚、寒冷地方では、振動が一定になるまで少々時間を要することがありますが振動が一定になるのを待ってご使用下さい。

電源接続 (TV-72・TV-74共通)

- スイッチがOFFになっていることを確認してから、差し込みプラグを電源に接続して下さい。

●使い方

<TV-72>

- 振動はHIGH(強)、LOW(弱)の2段切り替えが出来ますから身体の状態に合わせて、お好みの振動を、おえらび下さい。




<TV-74>

- TV-74の場合はON(入り)、OFF(切る)方式です。

- 床に置いた状態で使用する場合はハンドルを安定した所に正しく置いて下さい。

マットレスの上や座布団の上でのご使用はさけて下さい。

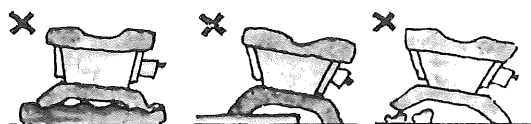

<マットレスの上> <座布団の上> <小物の上>

■ 疲労回復・全身美容に、下の写真の要領で使用ください。

(TV-72・TV-74共通)



● 首筋

パットの中央部のくぼみが首のつけ根に具合よく当る様にして行って下さい。


頭の中がスッキリし、同時に内臓にもスッキリとした効果があらわれます。



● 肩こり、肩根のツボ


肩から首筋にかけて軽く当てがいゆっくりと行って下さい。


仕事疲れ、勉強疲れがやわらぎます。

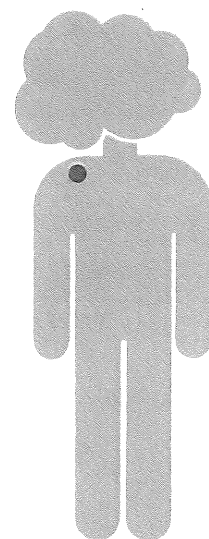

● 肩隅のツボ

腕を真横に水平に上げると肩のつけ根と肩先の三角筋が盛り上がります。その盛り上がった所が肩隅のツボです。このツボは特に五十肩に効果的です。

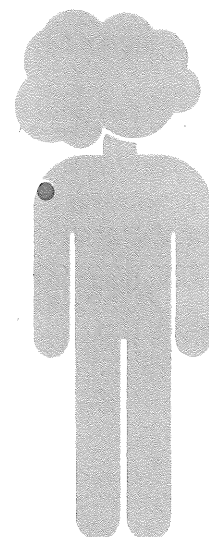


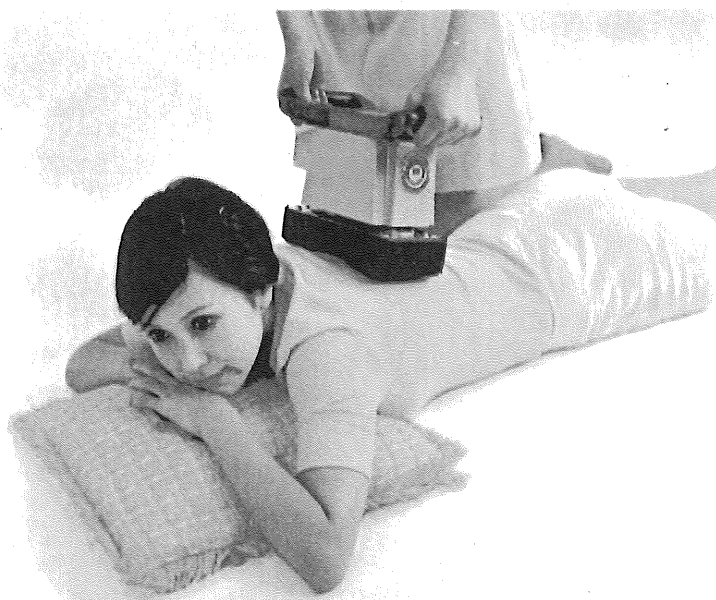

●肝臓の弱りを整えるツボ

背柱の左右両側約4、5センチの第九胸椎の棘突起の下に当てがって下さい。



すると、肝臓の疲れをほぐし背痛、胸のつかえ、胃のもたれ、胃下垂等に効果があります。

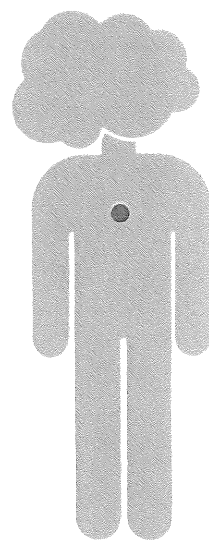

●腹部

TV-72の場合はLOW(弱)にして軽く腹部に当てがって下さい。


胃腸の弱い人や便秘がちの人また美しいボディラインのためのマッサージにも効果があります。

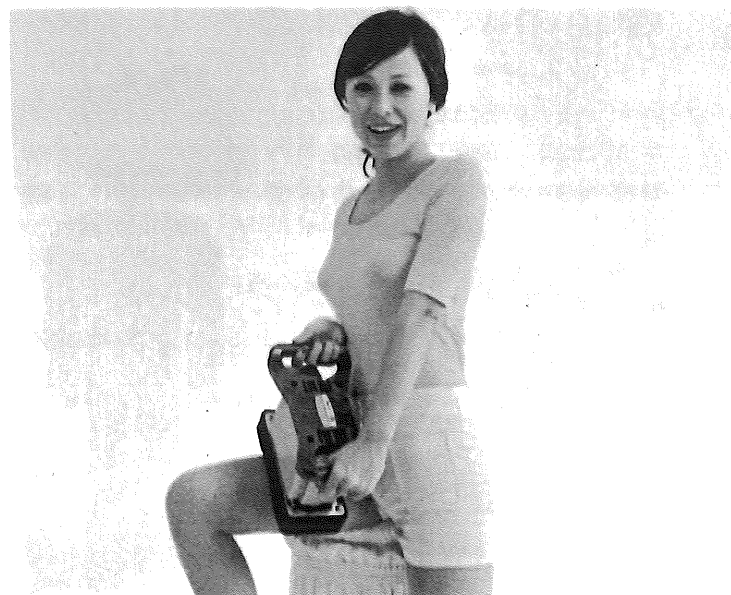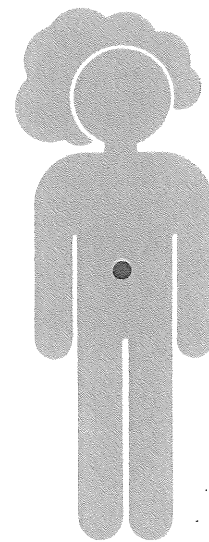

●大腿内側のツボ

写真の様に大腿内側に押し当てて下さい。

(生理痛、腹痛、胃腸、肝臓、脾臓、足の疲労その他足のしびれ等に効果があります。)


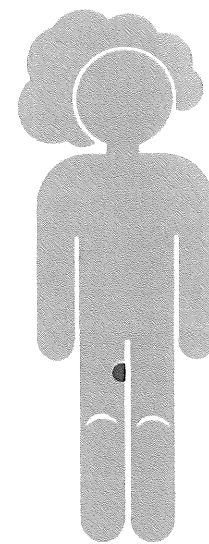




●美 容



大腿部の上に乗せ、1ヶ所に10秒間隔ぐらいで移動させて下さい。スマートな脚線美のために……血海のツボ・女性特有の症状に効くツボ。

(女性の方にぜひ覚えておいてほしいツボ)

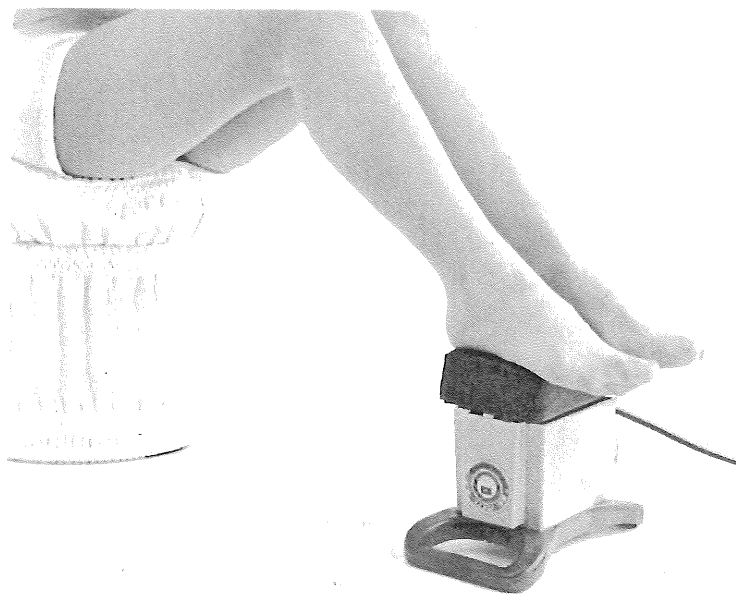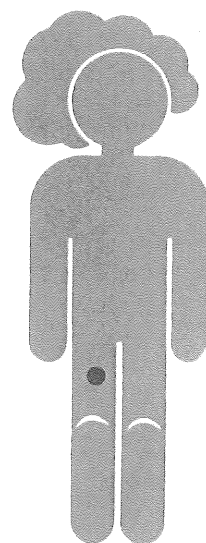


●足のウラ

写真の様に足のウラの土踏まずに当てがって下さい。ここをマッサージすると全身の疲労回復に役立ち、特に冷症に効果があります。

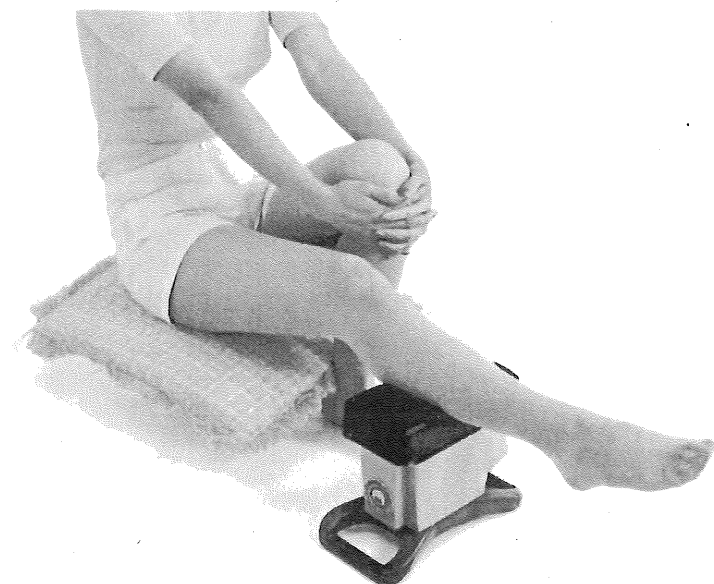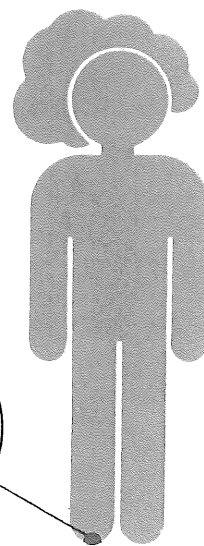

●足のふくらはぎ


いわゆる百里のツボといわれ、右足は胆のう、左足は胃、両足は腰痛等多くの効果が得られます。又、全身の疲労回復にも役立ち、足の線を美しくみせるマッサージにも効果的です。

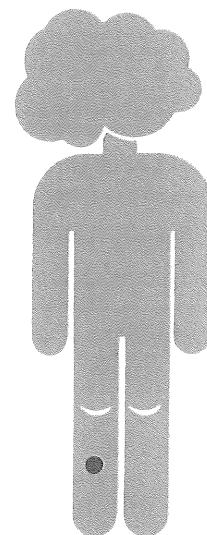



●肩こりに (TV-74)


写真のようにご使用になれば肩たたきに効果が得られます。

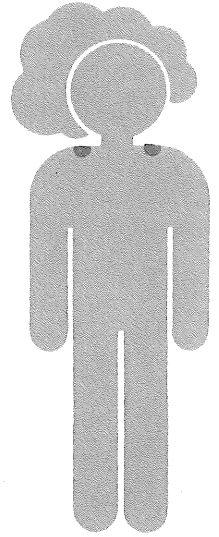


●ご使用の際又ご使用後は次の点に心掛けて下さい。

●注意事項 (TV-72・TV-74共通)

- 水のかからない場所で使用して下さい。
- 使用中は必要以上無理に押さえついたり、長時間使用したり、その他乱雑に扱わないで下さい。

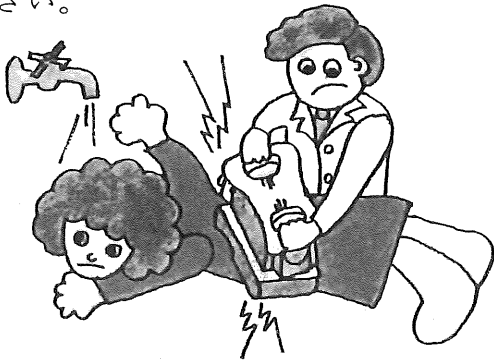

- コードを電源から外す場合はコードを持って引き抜いたりしないで、プラグを握って取り外して下さい。
- コードを持って機械をぶらさげたりしないで下さい。

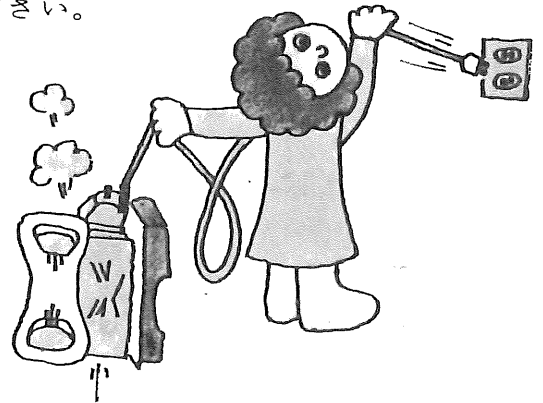


●使用後の保管 (TV-72・TV-74共通)

- 水、湿気の無い所に保管して下さい。
- 化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所に保管しないで下さい。



- 機械に異常を来たした時は必ず専門店、修理店で修理して下さい。

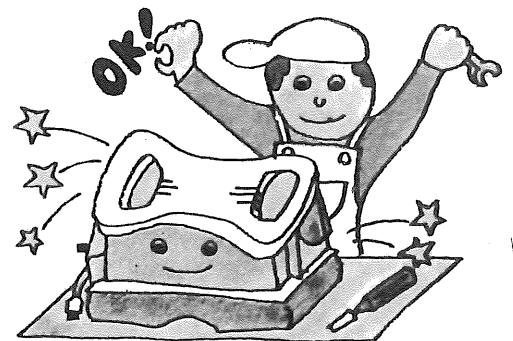


展示台のあるお店で手に取ってお試し下さい

リョービ東和のバイブレーターは全国有名百貨店、スーパー、薬局、東和特約販売店に展示してあります。ご自由に使ってマッサージ、美容効果をお試し下さい。

お好みのシールを貼って
楽しくお使い下さい。

バイブレーターには花柄のシールが2種類入っています。

あなたのお部屋のムードに合わせて、より楽しくご利用下さい。

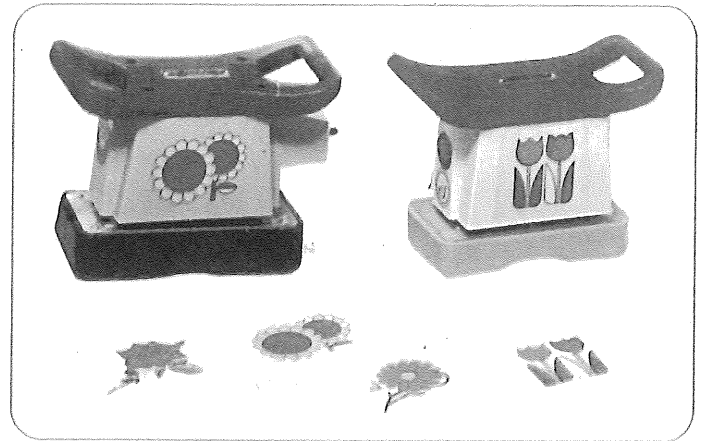

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明の点があった場合にはご遠慮なく全国各地のリョービ東和電動工具販売店、リョービ東和各営業所にお問い合わせ下さい。

※改良のため製品仕様が変わる事があります。

発売元



リョービ東和株式会社
リョービグループ

〒464 名古屋市千種区春岡通り7の49
電話(052)761-5111

製造元



リョービ株式会社

〒726 広島県府中市目崎町762
電話(0847)41-4111